


Tristel Duo™

ULT

TIL KAVITETS- OG
ULTRALYDSPROBER

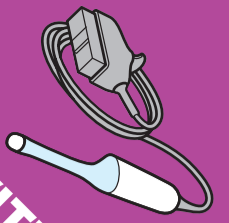

Bemærk:

- Må ikke anvendes, hvis flasken er beskadiget.
- Desinficer hænderne og brug handsker ved håndtering af desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.
- Fjern og kassér låsen, der forhindrer pumpen i at blive trykket ned.
- Hvis det er første gang Tristel Duo ULT skal bruges, skal der trykkes 2-4 gange på pumpen for at aktivere den.
- Brug Tristel Duo ULT på overflader, der er renses for ultralydsgel. Hvis overfladen er synligt snavset, følg hospitalets procedurer for rengøring.
- Til professionel brug.

TRIN 1



Tryk to gange på pumpen for at frigøre Tristel Duo på en serviet. (Tristel Dry wipes anbefales).


TRIN 2



Brug servietten til at fordele skum over hele overfladen på udstyret. Sørg for at alle områder er dækket med skum. Gentagende aftørring af overfladen er ikke nødvendigt og bør undgås for at forhindre partikelafgivelse. Hvis det er nødvendigt anvendes en vatpind for at fordele skummet i fordybningerne.

Bemærk: Bortskaf den brugte serviet i henhold til hospitalets retningslinier. Må ikke genbruges.

TRIN 3

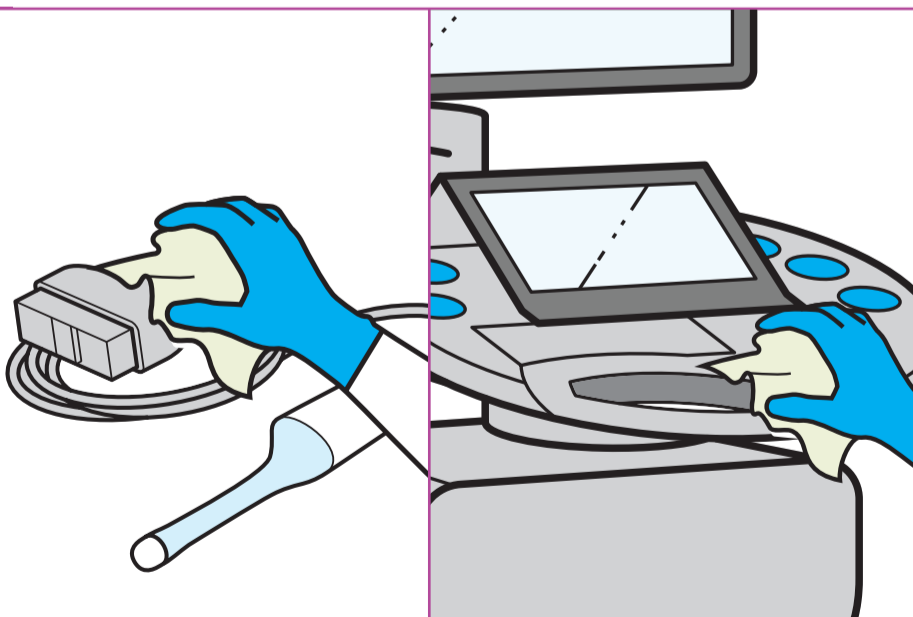

Brug Tristel Duo ULT til højniveau-desinfektion af steder, som proben har været i kontakt med, såsom holdere, kabler og stik.

TRIN 4



Lad det tørre i minimum **30 sekunder**.

Bemærk: Opbevar det medicinske udstyr i overensstemmelse med hospitalets retningslinier for at undgå skader eller rekontaminering.

Tristel™

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

For mere information om Tristels patent, besøg: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-389-1
January 2018