

Drænageinstruktion

PleurX katetersystem


Denne instruktion skal kun bruges som en vejledning. Læs brugervejledningen som er vedlagt drænagekittet, og se drænagevideo for mere detaljeret instruktion.

September 2019

VINGMED | ViCARE

FÅ BEGYNDT Klargør indholdet i drænagekittet og vask dine hænder grundigt.


1 Fold den blå indpakning ud på et rent bord. Placer flasken tæt ved det blå stykke indpakning, og placer flaskens adgangsspids på den blå indpakning.

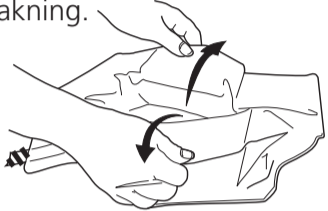

2 Tag hver handske ved håndledet og tag dem begge på.



3 Åben pakken med ventil hætten og lad den falde ud på den sterile blå indpakning.

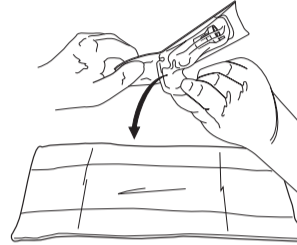


4 De 3 alkoholserviet pakninger rives op. Læg de nu åbne pakninger på den blå indpakning lidt væk fra de sterile dele.




TILSLUT DRÆNAGE FLASKEN Kateter og adgangsspids skal holdes rene.


5 Rulleklemmen på drænageslangen lukkes helt, og plasticbeskyttelsen fra adgangsspidsen fjernes.

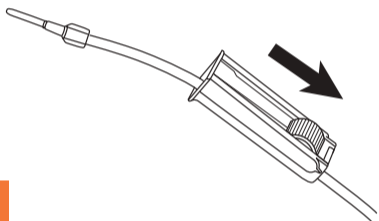


6 Tag ventilhætten af katetret.

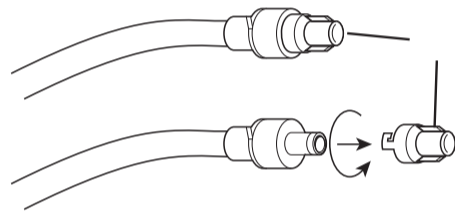

7 Rengør omkring ventilåbningen med den 1. alkoholserviet.

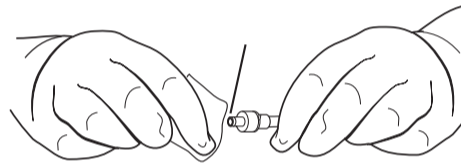


8 Indsæt adgangsspidsen i kateterventilen.

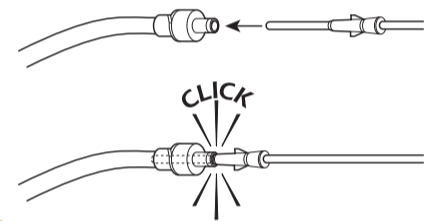

VÆSKE DRÆNAGE Dræn ikke mere end 2 liter fra maven af gangen.


9 Fjern plasticstykket fra toppen af drænageflasken.

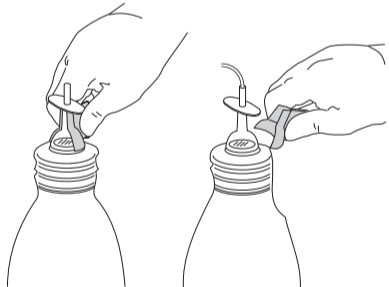


10 Tryk "T" stemplet ned.



11 Rulleklemmen på drænageslangen åbnes for at påbegynde drænage.

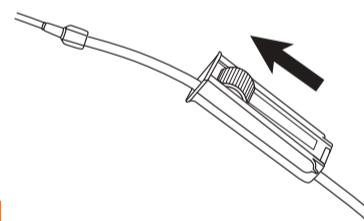


12 Rulleklemmen på drænageslangen lukkes, når dræningen er slut.

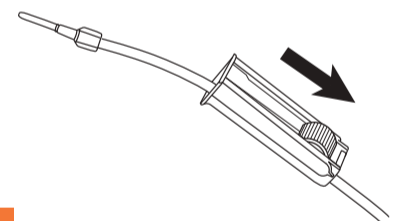


DE SIDSTE TRIN SAMT BORTSKAFFELSE Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så kontakt din læge eller sygeplejerske.


13 Træk adgangsspidsen ud af kateterventilen og læg adgangsspidsen fra dig.

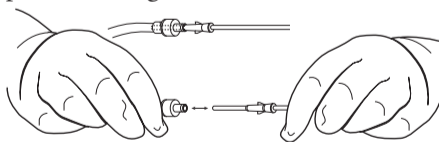


14 Rengør omkring ventilåbningen med den 2. alkoholserviet.

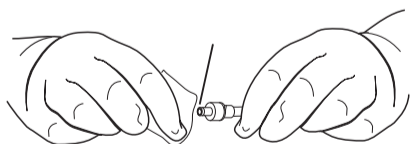


15 Sæt ny ventilhætte på kateterventilen og drej indtil den "klikker" og er i låst position.

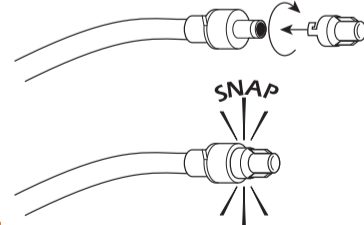


16 Rengør huden omkring katetret med den 3. alkoholserviet.

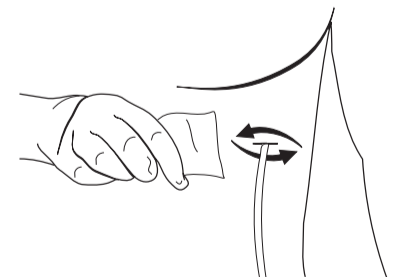


17 Placer skumpatchen omkring katetret, og rul katetret pænt sammen oven på patchen. Dæk katetret med gazepatchen.

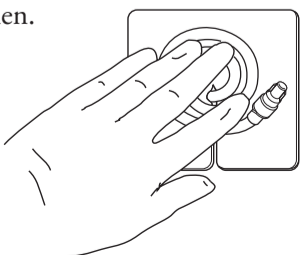

18 Sæt den selvklæbende bandage over gazepatchen og fjern plasticdelen.

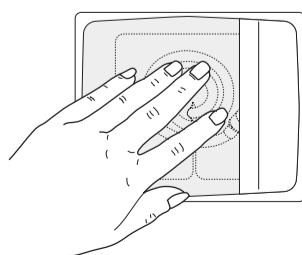

19 Tryk "T" stemplet ned og bevæg stemplet i en cirkulær bevægelse så hullet i folieforsøglingen forstørres, og væsken kan hældes ud.

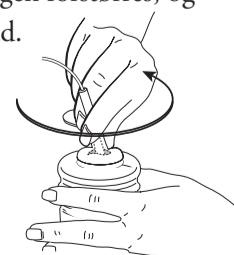

20 Den fleksible gummi-hætte og drænageslangen fjernes fra flasken. Hæld flaskens indhold ud i toiletet. Placer flasken i en affaldspose der lukkes tæt og kasser den.

